

MesoBioLift RF

TECNOLOGÍA BIO-REPARADORA



redensifica

reafirma

redefine

desconggestionona

**Reafirmación,
redensificación
y desconggestionón
de la piel
y los tejidos**

Radiofrecuencia facial y corporal

La tecnología que sincroniza radiofrecuencia y corriente galvánica

MESOBIO LIFT RF es el equipo más avanzado de su gama en tratamientos antiaging. Su mecanismo reparador estimula las células de todos los estratos cutáneos, activando su capacidad auto-regeneradora. De esta acción intracelular, resulta la reconstrucción de la red bio-redensificadora que da sujeción a nuestros tejidos. La piel responde de manera natural y progresiva mostrando un aspecto terso, tonificado y descongestionado.

Tres potentes activos aliados para hacer frente a la laxitud dérmica.

La ENERGÍA ENDO-TÉRMICA generada por MESOBIO LIFT RF resulta de la fusión de RADIOFRECUENCIA y CORRIENTE CONTINUA. Esta nueva emisión es un potente generador de calor interno controlado con capacidad para introducir transdérmicamente principios activos en el interior de la piel.

El sistema Mesobiolift contempla tres tratamientos estrella:

1. **REDENSIFICACIÓN CUTÁNEA FACIAL** con principios activos de célula madre, Supreme Cell.
2. **REAFIRMACIÓN CORPORAL** con principios activos reafirmantes.
3. **DESCONGESTIÓN CORPORAL** con principios activos descongestivos con base de mentol.



El reto tecnológico, la sincronización de energías.

Innovación tecnológica.


Hasta ahora los tratamientos dérmicos se programaban por fases, primero estimulando una vasodilatación y posteriormente penetrando nutrientes hasta el interior de la piel.

Mesobiolift RF actúa de manera sincronizada desde la superficie y desde el interior de la piel con el objetivo de accionar los engranajes que potencian la regeneración celular.

Acción endo-térmica.

La creación de una sola onda endo-térmica capaz de sincronizar dos acciones con funciones complementarias ha sido el reto del departamento de investigación y desarrollo.

El sistema Mesobiolift es el resultado de esta innovación. Un método eficaz que multiplica las posibilidades de tratamientos faciales y corporales, a la vez que reduce los tiempos de aplicación.

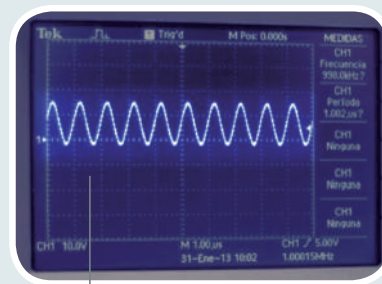

Onda endo-térmica, generadora de calor y vehículo óptimo para transportar principios activos al interior de la piel.

Su intensidad es regulable según el tratamiento requerido.



Máxima atención a la atención a la naturaleza y cuidado de la piel.

Tratamos la piel, distintivo de belleza y salud, con el máximo cuidado y profesionalidad. Los tejidos de la dermis perciben la energía endo-térmica con diferente intensidad, según su capacidad de absorción.

Los de mayor resistencia al paso de la energía tienden a calentarse con mayor rapidez y más intensamente que los tejidos que presentan menor resistencia al paso de energía.

Aplicadores pensados con un doble objetivo, garantizar la seguridad de la piel y facilitar el trabajo profesional

Piloto indicador de emisión

Emisión coaxial, no requiere de incómodos electrodos de retorno



Emisión bipolar resistiva, emisión controlada y selectiva de energía

Diseño ergonómico. Disparo de energía por pedal para manipular el aplicador libremente



Programas específicos para cada tratamiento.


Mesobiolift RF acerca al máximo el protocolo de tratamiento a las necesidades de la piel de cada persona.

El equipo dispone de dos aplicadores de energía para tratamientos faciales y uno para tratamientos corporales.

Este método de trabajo previene de agresiones innecesarias a la piel, preparándola progresivamente para recibir la energía que puede tolerar.

PROTOCOLO PROFESIONAL

FASE I	Barrido de 1MHz a 3MHz	Preparador cutáneo	Controla el aumento progresivo de temperatura en la piel. Mantiene estimuladas y receptivas todas las capas cutáneas.
FASE II	Señal endotérmica	Activador celular	Tratamiento en sinergia de RF e introducción de principios activos.
FASE III	Radiofrecuencia	Potenciador de eficacia	Activador circulatorio para potenciar el aprovechamiento de principios activos.

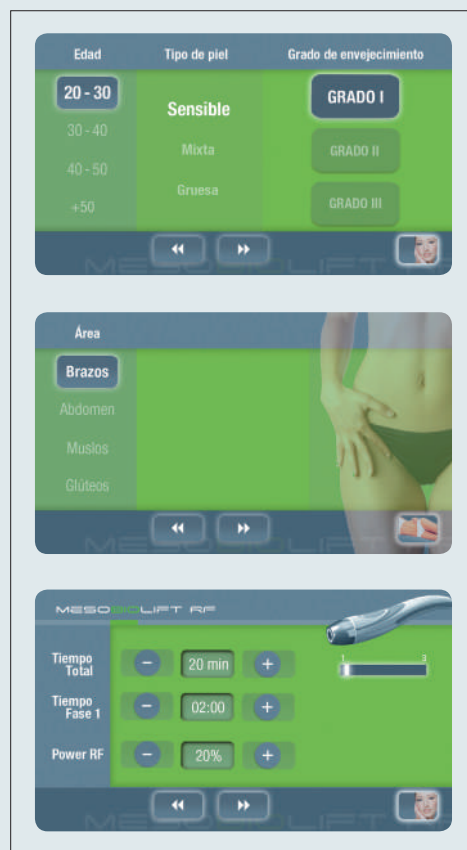

Tratamientos a la carta, manejo intuitivo, resultados inmediatos.

Tratamientos faciales.

Con el paso del tiempo, la renovación celular de los tejidos se ralentiza y la piel pierde elasticidad debido a que las fibras encargadas de su recuperación, colágeno y elastina entre otros, se debilitan.

La dermis, especialmente la del rostro y escote, se vuelve más fina y tienden a aparecer pliegues.

EFFECTOS:

1. Activación inmediata de la circulación sanguínea	Recepción de principios activos de Supreme Cell y accionado de la neogénesis celular.
2. Contracción de las fibras de colágeno	Efecto inmediato: tensado de fibras de colágeno del tejido subcutáneo Efecto progresivo: formación de nuevas fibras elásticas.

RECONSTRUCCIÓN DE LA RED BIO-REDENSIFICADORA DE SUJECCIÓN DÉRMICA

Reafirmación, remodelación de óvalo, mejora del tono elástico general, mejora líneas de expresión

Tratamientos corporales.

La radiofrecuencia induce la proliferación de fibroblastos dérmicos y activa el sistema arteriovenoso en los tejidos, mejorando notablemente la flacidez de zonas difíciles como cara interna de muslos y brazos.

Además, impulsa un estímulo circulatorio que mejora la oxigenación y el drenaje de la piel.

TRATAMIENTO REAFIRMANTE

Revitalización y regeneración cutánea.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Barrido de 1MHz a 3MHz | Preparación cutánea. |
| 2. Señal endotérmica | Introducción de principios activos reafirmantes. |
| 3. Radiofrecuencia de 1Mhz | Activador circulatorio y potenciador de eficacia. |

TRATAMIENTO DESCONGESTIVO

Reactivación de irrigación sanguínea.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Radiofrecuencia de 1Mhz | Termoterapia intensa sobre tejidos con acción vasodilatante. |
| 2. Corriente continua | Penetración de principios activos descongestivos con base de mentol. Acción vasoconstrictora. |

Negocios con marketing 360

RÖS'S te propone todo un paquete de apoyo para que promociones tus tratamientos en tu centro y en tus redes sociales.



Promoción en tu centro

GRATUITO

- 1 Poster 50x70 cm.
- 400 Flyers
- 1 Display portaflyers



Promoción digital

GRATUITO


- Diseños digitales para tu comunicación en redes sociales.
- En formatos editables y libre de derechos de imagen.



Documentación y formación

GRATUITO

- Manual de uso.
- Formación.

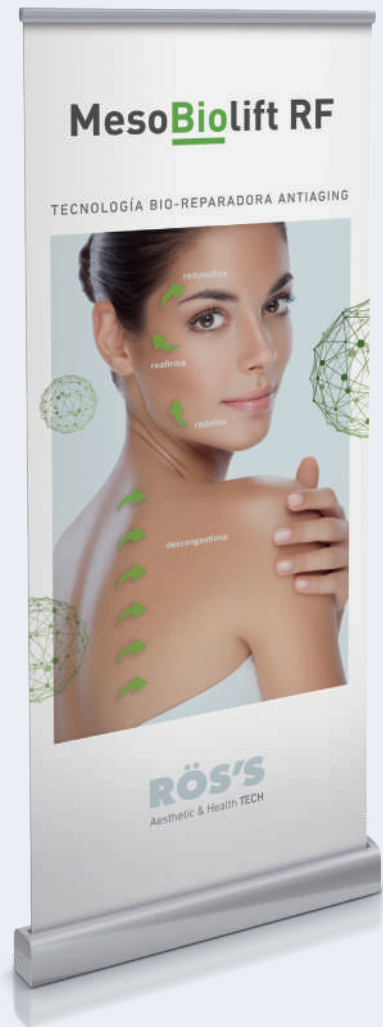

*Roll-up bajo pedido

Visita nuestra web oficial www.ross.es y regístrate como profesional para acceder a tus contenidos digitales.



DATOS TÉCNICOS

0028480
MESOBIO-LIFT RF

Alto: **950 mm**
Ancho: **590 mm**
Fondo: **560 mm**
Peso: **19 kg**

Frecuencia: **1/3MHz**
Modo: **Continuo**
Potencia aplicador: **40 W**

DOTACIÓN DE ACCESORIOS

Código	Accesorio	Cantidad
04RF000	APLICADOR ESPECÍFICO	1
04RF010	APLICADOR FACIAL	1
04RF020	APLICADOR CORPORAL	1
0401700	PEDAL DIN-5 ROSCA	1
6600092	SUPREME CELL 500ML	1
6600110	EMULSIÓN REAFIRMANTE RF 1.000ML	1
6600100	EMULSIÓN DESCONGESTIVA IM 1.000ML	1
0077220	PIE BETA INCLUIDO 79X45 CM	1



Formación



Cobertura técnica



SUPREME CELL



Emulsión Reafirmante



Emulsión Descongestiva



Pack de marketing digital y físico

RÖS'S, crecimiento para los profesionales de la estética y el wellness

RÖS'S innova y fabrica equipamiento tecnológico para salones de estética, medicina estética y fisioterapia. Nuestra misión es acompañar a los profesionales de la belleza y el wellness en su crecimiento ofreciéndoles la máxima innovación en tecnología, todos los servicios necesarios para su formación continua y el desarrollo de su marketing. El producto RÖS'S está diseñado y fabricado íntegramente en España y cuenta con una red comercial autorizada que garantiza el mejor servicio postventa. Cumplimos con la Certificación CE y la norma ISO 93485:2016.



INNOVACIÓN SOSTENIBLE



PROVEEDORES DE CERCANÍA



COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE



APOYO A LA MUJER EMPRENDEDORA



COMPROMISO CON LA FORMACIÓN CONTINUADA

RÖS'S

Aesthetic & Health TECH

www.ross.es
[#rossestetica](https://twitter.com/rossestetica)